


Compo-Art™ Kapsamlı Ürün Yelpazesi

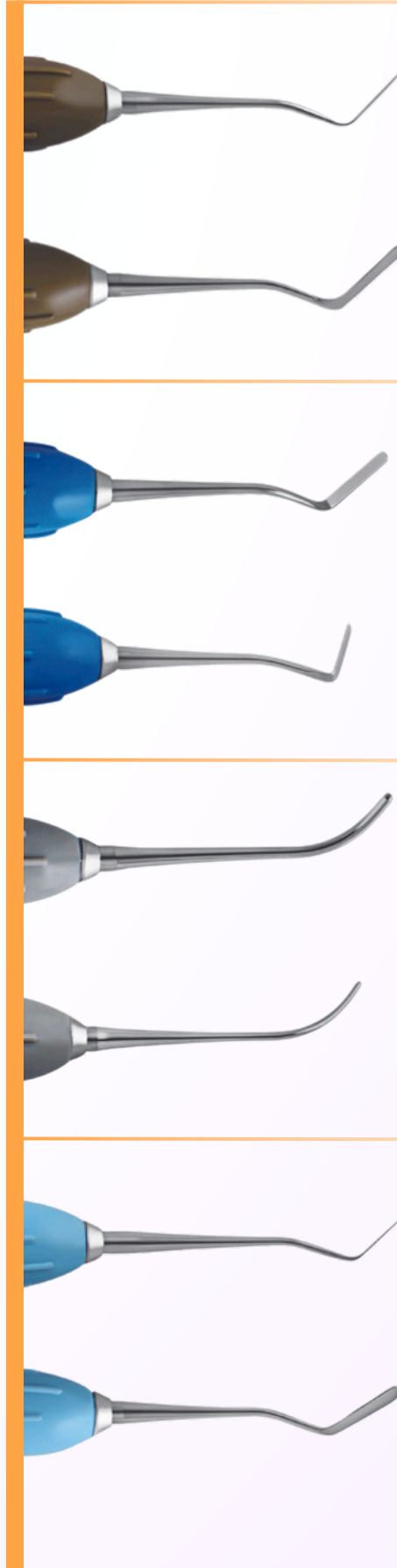

Compo-Art™ Applicator

Kompozit materyalin taşınması ve estetik biçimlendirilmesi için özel olarak tasarlanmış, ince ve esnek bir spatula. Esnek ucu sayesinde kompozit katmanları hassas ve yumuşak bir şekilde şekillendirilerek doğal diş formu oluşturulur. Applicator'ın ince ucu, dar bölgelerde veya matriks bandı kenarında kolayca modelleme yapmaya olanak tanır.

DR.400.011

Compo-Art™ Applicator Twist

Kompozit modelleme için özel olarak tasarlanmış, ince, esnek ve dar bir spatula. Applicator Twist, matriks içerisindeki approximal bölgelerde ve marjinal sırtlarda kolay modelleme imkânı sunar. Kıvrımlı uçları sayesinde, el pozisyonunu değiştirmeye gerek kalmadan zor ulaşılan alanlara rahatlıkla erişim sağlar.

DR.400.021

Compo-Art™ Condensor

Kompozit modelleme için özel olarak tasarlanmış, uzun ve yuvarlak bir plugger. Açılı sapları sayesinde tüm kaviterlerde rahat erişim sağlar. Condenser, farklı boyutlardaki kaviterlerde ve hem ön hem de arka bölgelerde kullanılabilen kalın ve ince uçlara sahiptir. Yuvarlatılmış çalışma ucu, kompoziti nazikçe sıkıştırırken yapışma riskini ortadan kaldırır.

DR.400.031

Compo-Art™ Modeller

Özellikle geniş ve ince yapıya sahip kompozit modelleme spatulası. Kesici dişlerin bukkal yüzeyleri gibi geniş diş alanlarında kullanım için idealdir. Geniş spatula ucu, kompoziti etkili bir şekilde düzleştirir. Ucunun esnekliği, inceliği ve keskinliği, hassas estetik detaylar oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca kompozitin şiringadan uygulanmasında da başarılı bir şekilde kullanılabilir.

DR.400.041

Compo-Art™ Fissure

Son derece keskin ve sivri uçlara sahip bir modelleme aleti. Konik ucu, arka dişlerin oklüzal anatomisini tek bir aletle şekillendirmek için mükemmeldir. İnce ve sond şeklindeki ucu, fissürlerin ve mamelonların modellemesi ile karakterizasyon kompozitleri ve sealant katmanlaması için idealdir. Fissure'nin esnekliği, diş yüzeylerinde kalan fazla bonding reçinesinin nazikçe kontrol edilmesini de sağlar.

DR.400.051



Compo-Art™ Remover

Kompozitin taşınması ve estetik şekillendirilmesi için tasarlanmış, çok ince ve esnek bir spatüldür. Esnek çalışma ucu, kompozit katmanlarını dişin doğal formunu taklit edecek şekilde nazik ve hassas bir şekilde şekillendirir.

DR.400.061



Compo-Art™ Measurer

Anterior restorasyonlarda kompozit katmanlarının doğru yatay ve dikey kalınlıklarını uygulamak için kullanılan özel bir alet. İnce silindirik uç, polimerize edilmemiş dentin kompozitini nazikçe şekillendirerek mine kompoziti için alan bırakır. Kalın uç ise kavite kenarına yerleştirilerek, sonlandırma çizgisine uygulamak için gereken şeffaf kompozit miktarını belirler. Sonuç, opak ve şeffaf kompozitlerin dengeli bir şekilde yerleştirildiği estetik bir restorasyondur.

DR.400.071



Compo-Art™ Posterior Measurer

Posterior restorasyonlarda kompozit katmanlarının gerekli dikey kalınlığını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çatal şeklindeki ucu, matris varlığında, komşu dişin yüksekliği ve anatomisine uyumlu olacak şekilde proksimal duvarın şekillendirilmesine olanak tanır.

DR.400.081



Compo-Art™ Universal Posterior

POSTERIOR İŞLEMLERİ İÇİN TEK ALET

Universal Posterior, üst düzey posterior kompozit restorasyonlar için tasarlanmıştır. Plugger ucu bulk dolgu ve kompozit modellemeye, keskin ucu ise oklüzal yüzey anatomisinin konturlanmasına olanak tanır.

DR.400.091



Compo-Art™ Universal Anterior

DOĞRUDAN VENEER UYGULAMASI İÇİN TEK ALET

LM-Arte™ Solo Anterior, üst düzey estetik anterior restorasyonlar için tasarlanmıştır. Yuvarlak ve düz spatulaları, özellikle ön dişlerin labial yüzeylerinin şekillendirilmesine olanak tanır.

DR.400.101



Compo-Art™ Cusp Measurer

Adeziv restorasyonlar sırasında cusp yüksekliğini ve kalınlığını ölçerek hazırlık gereksinimini değerlendirmek için geliştirilmiş özel bir alettir. Doğal diş dokusunun dayanıklılığını analiz etmek ve uygun restoratif tekniği seçmek için idealdir. Çatal şeklindeki ucu işaretlerine kadar dişe batıyorsa, diş yapısı doğrudan restorasyonu taşıyamayacak kadar zayıftır ve farklı klinik seçenekler göz önünde bulundurulmalıdır.

DR.400.111



Compo-Art™ Replica Posterior

Kompozitin taşınması ve estetik şekillendirilmesi için tasarlanmış, çok ince ve esnek bir spatüldür. Esnek çalışma ucu, kompozit katmanlarını dişin doğal formunu taklit edecek şekilde nazik ve hassas bir şekilde şekillendirir.

DR.400.141



Compo-Art™ Goldfogel B

Düz veya açılı ucu sayesinde, üst kesici dişlerin küçük yüzeylerinde kompozit konturlaması kolaylıkla yapılabilir.

DR.401.021

